


MESSANLEITUNG

Maßnahme A: Messen Sie den Umfang des Oberschenkels auf halber Strecke zwischen **Leistengegend** und **Knie** des Hundes.

Maßnahme B: Messen Sie den Umfang der Pfote des Hundes auf halbem Weg zwischen **Knie** und **Sprunggelenk**.

Maßnahme H: Messen Sie den Abstand zwischen Maßnahme A und Maßnahme B.

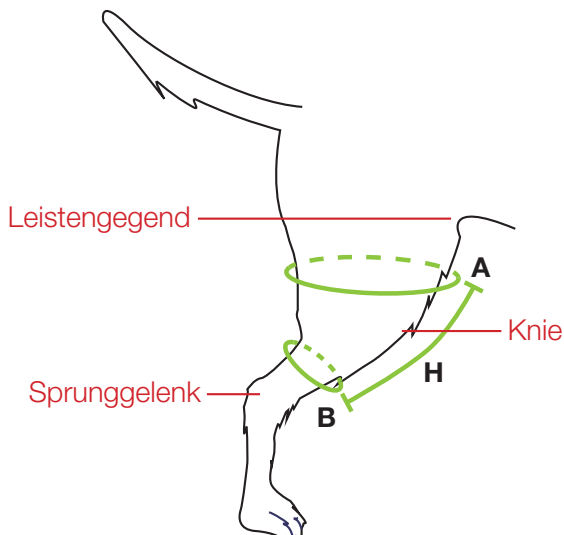

Sizes	A	B	H	Breed and weight examples *
S	21-25 cm	8-15 cm	15 cm	Cocker Spaniel, Medium Poodle (10-15 kg)
M	26-31 cm	10-16 cm	18 cm	Border Collie, Setter, English Pointer (15-30 kg)
L	29-34 cm	12-18 cm	22 cm	German Shepherd, Golden Retriever, Rottweiler (28-50 kg)
XL	over 36 cm	-	25 cm	Saint Bernard, Great Dane, Newfoundland (above 50 kg)

* **Achtung:** die vorgeschlagene Rassen und das Gewicht sind nur Richtwerte.

Um die Größe der Produkt genau zu bestimmen, nehmen Sie die angegebenen Messungen vor.


DIE AGILE-KNIEBANDAGE WURDE ENTWICKELT, UM IHREM HUND BEI LEICHTEN ENTZÜNDUNGEN DES KNIEGELENKS ZU HELFEN

Das Produkt ist aus weichem und atmungsaktivem Material hergestellt. Der ausgeübte Druck ermöglicht dem Hund eine vollständige Genesung, ohne seine Beweglichkeit des Kniegelenks zu beeinträchtigen. Sie kann auch bei sportlicher Betätigung verwendet werden.

- ▶ **ACHTUNG:** dieser Artikel ist weder eine Orthese noch ein Medizinisches Produkt.
- ▶ Bei Erkrankungen oder Verletzungen des Kniegelenks empfehlen wir die Verwendung der Othesen **BALTO LIGATEK** und **BALTO BT JUMP**.

ACHTUNG DER RÜCKENRIEMEN KANN VERSTELLT WERDEN:

- ▶ Entfernen Sie eines der beiden runden Klettenden.
- ▶ Schneiden Sie den Samtriemen ab, um ihn zu verkürzen.
- ▶ Bringen Sie das runde Klettende wieder an.

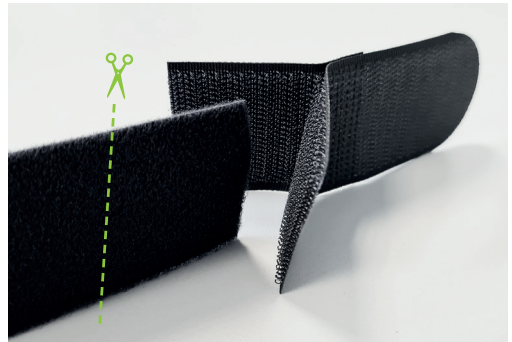

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- ▶ Das Produkt ist nur für Handwäsche mit sanften Waschmitteln geeignet.
- ▶ Die Kniebandage nicht in der Waschmaschine waschen.
- ▶ Den Hund die Kniebandage nicht den ganzen Tag tragen lassen: Die Kniebandage ist tagsüber, insbesondere bei körperlicher Bewegung, zu tragen und nachts abzulegen.
- ▶ Solange der Hund die Kniebandage trägt, sollte er nicht zu lange allein gelassen werden, da er versuchen könnte, die Kniebandage durch Beißen und Kratzen zu entfernen.


PACKUNGSIHALT

- A** - Oberer Riemen
- B** - Verankerungsset
- C** - Kniebandage
- D** - Verbindungsriemen



ANWEISUNGEN

1. Bereiten Sie die Kniebandage vor, indem Sie die Riemen öffnen und das Set entfernen (Abb. 1A). Öffnen Sie den oberen Riemen und entfernen Sie ihn aus dem äußeren oberen Ring und führen Sie ihn durch den inneren oberen Ring und verschließen Sie ihn mit dem Klettverschluss (Abb. 1B).

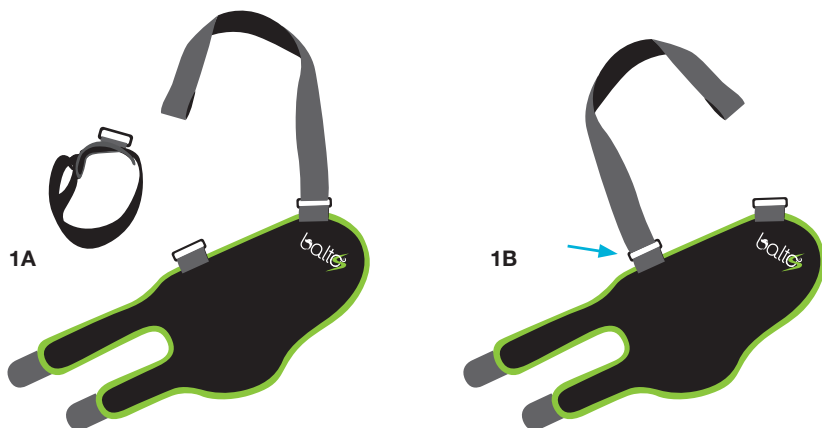


2. Positionieren Sie die Bandage mit der Teil zentral auf dem Knie des Hundes. Schließen Sie alle Riemen um das Bein und ziehen Sie diese fest.





ANWEISUNGEN




- 3.** Führen Sie den Riemen vorbei am Bauch bis zum Rücken und bringen Sie ihn vor das entgegengesetzte Bein. Führen Sie ihn in den oberen weißen Ring der Kniebandage ein und verschließen Sie ihn mit dem Klettverschluss fest an sich selbst.

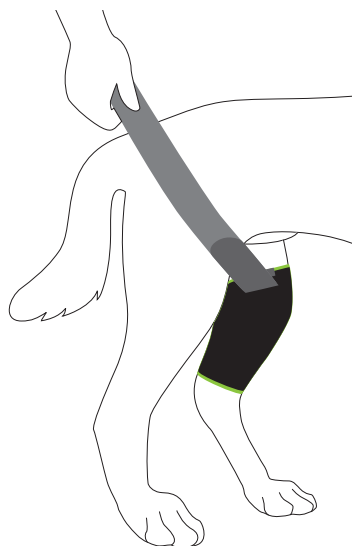

- 4.** Der Rückenriemen kann verstellbar werden. Entfernen Sie eines der beiden runden Klettenden. Schneiden Sie den Samtriemen ab, um ihn zu verkürzen. Bringen Sie das runde Klettende wieder an. Schließen Sie den Riemen an sich selbst und ziehen Sie ihn fest, um die Stabilität der Kniebandage zu gewährleisten.

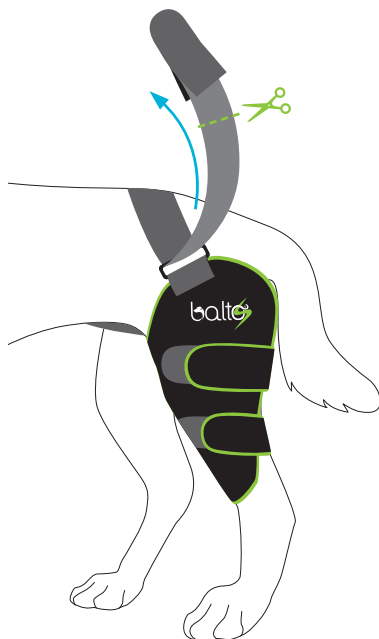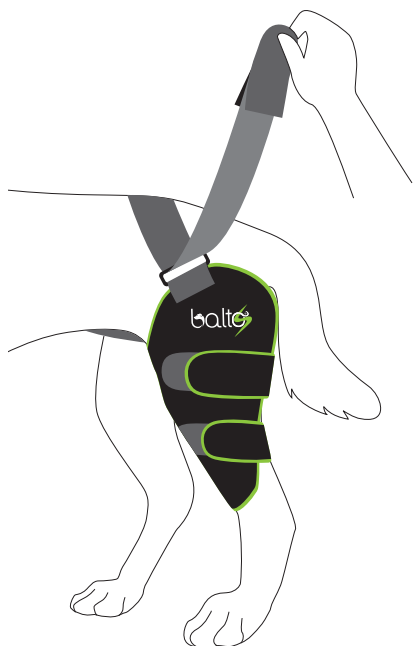


5. Führen Sie den Gurt unter den Gurt oder Kragen (Abb. 5A und 5B). Befestigen Sie den anderen Gurt unter dem hinteren Gurt (Abb. 5C). Kabelbaum und Halsband sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können in einer Zoohandlung erworben werden.

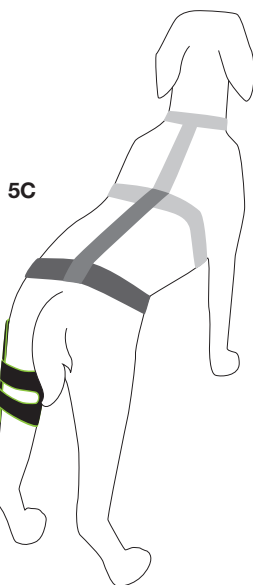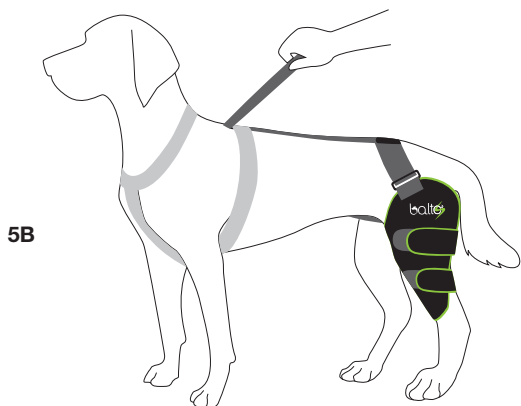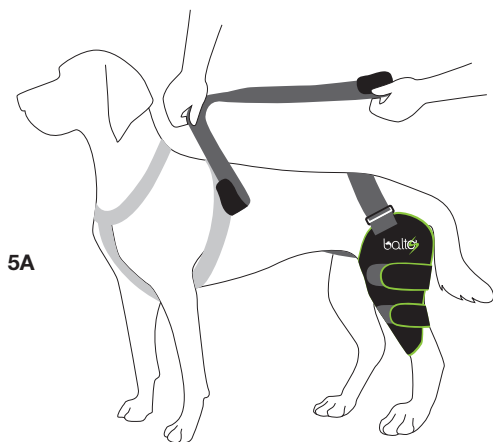


ANWEISUNGEN

(mit Set für Rüden)


- 1/2.** Bereiten Sie die Kniebandage vor, indem Sie die Riemen öffnen (Abb. 1).
Positionieren Sie die produkt mit der teil zentral auf dem Knie des Hundes.
Schließen Sie alle Riemen um das Bein und ziehen Sie diese fest

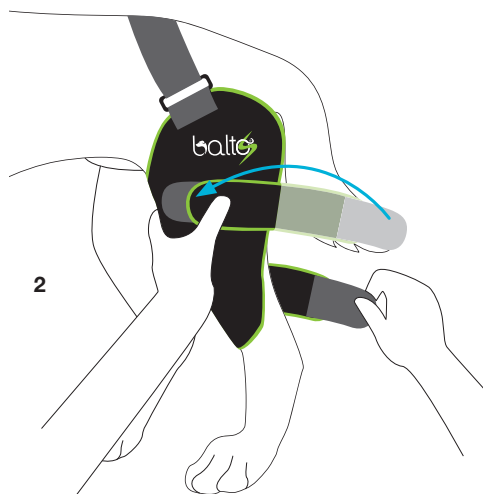

- 3.** Führen Sie den oberen Riemen über den Rücken des Hundes, öffnen Sie das Set und positionieren Sie es auf dem Knie des Beines ohne Kniebandage. Schließen Sie das Set mit dem Klettband und ziehen Sie es fest.

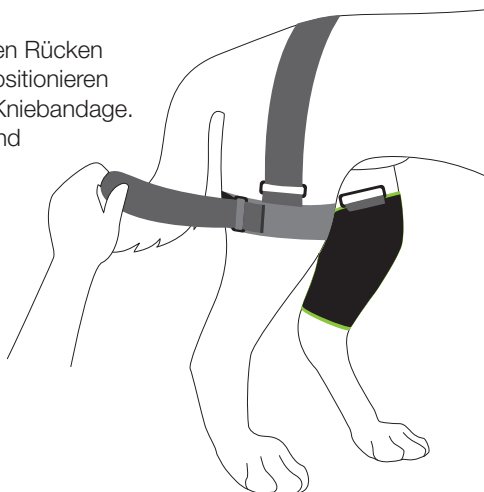

4. Der Rückenriemen kann verstellbar werden. Entfernen Sie eines der beiden runden Klettenden. Schneiden Sie den Samtriemen ab, um ihn zu verkürzen. Bringen Sie das runde Klettende wieder an. Schließen Sie den Riemen und ziehen Sie ihn fest, um die Stabilität der Kniebandage zu gewährleisten. Kletten Sie den Verbindungsriemen an den oberen Riemen. Hängen Sie das Klettende über den weißen Ring der Kniebandage (siehe Abbildung), führen Sie den Riemen durch den Ring des Brustlatzes oder den Kragen.

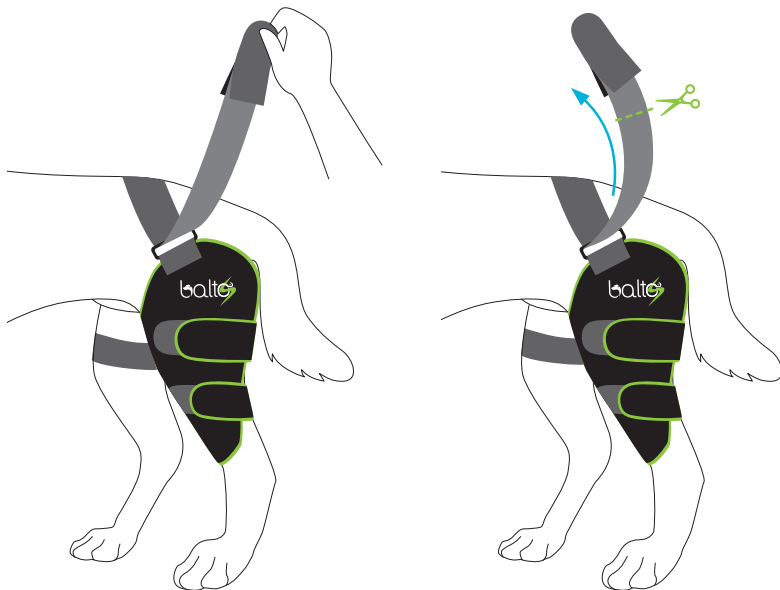

5. Führen Sie den Gurt unter den Gurt oder Kragen (Abb. 5A und 5B). Befestigen Sie den anderen Gurt unter dem hinteren Gurt (Abb. 5C). Kabelbaum und Halsband sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können in einer Zoohandlung erworben werden.

