




VALUE
funktionelle Lösungen
für das Badezimmer

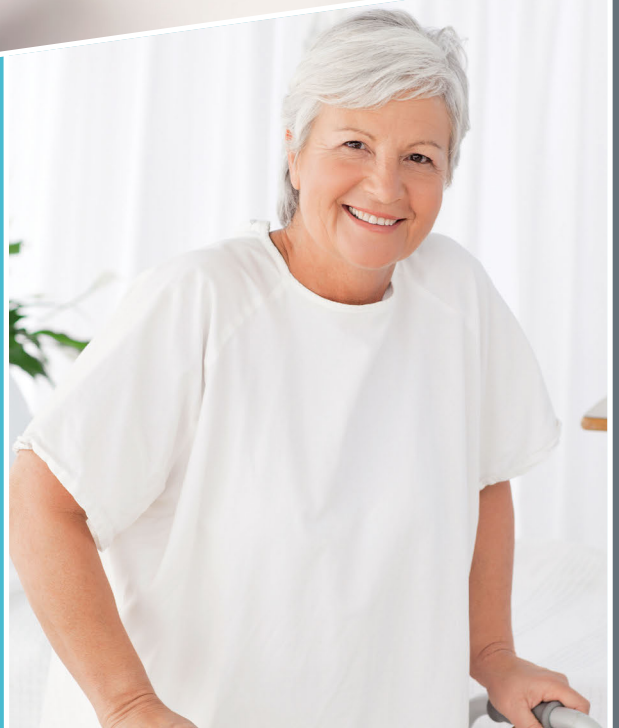

VALUE

Funktionelle Hilfsmittel für einen sicheren Alltag.

Die VALUE-Serie bietet allen, die bei den alltäglichen Tätigkeiten im Badezimmer zusätzliche Hilfe benötigen, eine sichere Umgebung und erleichtert zugleich den Arbeitstag für diejenigen, die für sie sorgen und sie pflegen.

- ▮ Alle Produkte werden aus Materialien hergestellt, die robust und widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln und der feuchten Umgebung des Badezimmers sind.
- ▮ Das Design der Produkte trägt modernen Anforderungen an Ergonomie und Hygiene Rechnung und gewährleistet einen guten Komfort.
- ▮ Die Konstruktionen sind getestet und solide. Sie halten jahrelangem täglichem Gebrauch stand.

Der Respekt für Menschen und ihr Recht auf ein gutes Leben unabhängig von ihrer Mobilitätsbeeinträchtigung sind die Eckpfeiler der Philosophie von Pressalit Care, die sich in zwei Worten zusammenfassen lässt:

keep living

Inhalt

Waschtisch-Lifter, Waschtisch und Armatur	Seite	4
Stützklappgriffe	Seite	6
WC-Sitze	Seite	8
WC-Keramik	Seite	10
Duschklapsitze	Seite	11
Haltegriffe	Seite	12
Maßzeichnungen	Seite	14
Montage und Zubehör	Seite	15

Waschtisch-Lifter, Waschtisch und Armatur



Höhenverstellbare Waschtisch-Lifter sind für Pflegeeinrichtungen gut geeignet. Die Einstellungsmöglichkeiten machen den Benutzer selbständiger und verbessern die Arbeitsbedingungen des Helfers.

Die Form und Größe des Waschtisches gewährleisten, dass sowohl sitzende als auch stehende Benutzer die Waschtischarmatur bedienen können und dicht an den Wasserstrahl herankommen.

Die Armatur des Waschtisches muss einfach, bequem und logisch zu bedienen sein - gleichgültig, ob man steht oder sitzt.



Ergonomischer Waschtisch mit runde Formen und kompaktes Design.



Der Waschtisch ist mit einer Hohlkehle versehen, die verhindert, dass Wasser über die Seiten des Waschtisches hinaus oder zur Wand hin fließt.



Da der Waschtisch im Verhältnis zu seiner Größe relativ flach gestaltet ist, ist es möglich, mit dem Rollstuhl ganz darunter zu fahren und den Wasserhahn bequem zu erreichen.



Ergonomischer Waschtisch

◀ **R2052000**
R2053000

MATRIX New Curve Waschtisch mit Überlauf
MATRIX New Curve Waschtisch ohne Überlauf

Die Vorderseite – mit dem nach innen schwingenden Bogen – stabilisiert sowohl den stehenden als auch den sitzenden Benutzer. Sie ermöglicht, sich an den gerundeten Kanten festzuhalten und abzustützen.


Das Design der Ecken gibt dem sitzenden Benutzer Platz und Halt und die abwärts gehenden Seiten des Waschtisches gibt eine ergonomische Unterstützung der Unterarmen. Die flache Unterseite gibt unter dem Waschtisch Platz für die Beine.

Hahnloch: Ø 36 mm.

Für die Platzierung der Wasserinstallation siehe Seite 15.



Ergonomischer Waschtisch

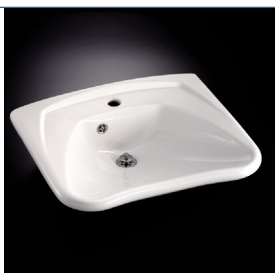

- ◀ **R2050000** MATRIX Curve Waschtisch mit Überlauf
- R2051000** MATRIX Curve Waschtisch ohne Überlauf

Die Vorderseite – mit dem nach innen schwingenden Bogen – stabilisiert sowohl den stehenden als auch den sitzenden Benutzer. Sie ermöglicht, sich an den gerundeten Kanten festzuhalten und abzustützen.

Das Design der Ecken gibt dem sitzenden Benutzer Platz und Halt für die Ellenbogen, und die flache Unterseite gibt unter dem Waschtisch Platz für die Beine.

Hahnloch: Ø 35 mm.

Für die Platzierung der Wasserinstallation siehe Seite 15.



↕ Höhenverstellbarer Waschtisch-Lifter - Gasdruck

- R1210000** Höhenverstellbar, 320 mm

Die Höheneinstellung mithilfe eines Gasdruckzylinders ist besonders gut geeignet, wenn die Höhe regelmäßig, beispielsweise für wechselnde Benutzer, verstellt wird.




↕ Höhenverstellbarer Waschtisch-Lifter - manuell

- R1214000** Höhenverstellbar, 150 mm

Die manuelle Höheneinstellung ist gut geeignet, wenn die Höhe des Waschtisches nur ab und zu, und durch Helfer, verstellt wird.

Armatur für Waschtische

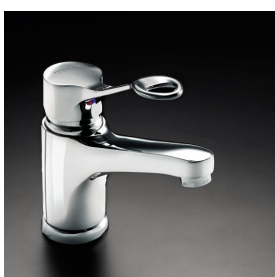

- RT622** Armatur mit langem Drehhahn

Der ringförmige Griff ist geeignet für Benutzer mit Mobilitätsbeeinträchtigungen. Der lange Drehhahn erleichtert es dem sitzenden Benutzer, das Wasser zu erreichen. Der Drehhahn wird zur Seite geschwenkt, wenn er im Weg ist.

Die Kennzeichnungen für warmes und kaltes Wasser können sowohl aus stehender als auch aus sitzender Position erkannt werden. Der Verbrühschutz verhindert eine unerwünschte Einstellung über 40°.

Eingebaute Wassersparfunktion für kleine und große Wassermengen. Der Griff ist federbelastet. Dies vermeidet spritzen und übermäßigen Wasserverbrauch.

VA-geprüft (Dänemark).

Stützklappgriffe



Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet.

Die vielen verschiedenen Stützklappgriffe bieten sowohl dem selbständigen Benutzer als auch dem Helfer Sicherheit.

Die Stützklappgriffe besitzen eine Rilsan®-beschichtete Oberfläche, mit angenehmer Haptik und hochwertigem Korrosionsschutz.

Die Stützklappgriffe können entweder fest oder höhenverstellbar montiert werden und können, wenn nicht benötigt, hochgeklappt werden.

Materialien: Rilsan®-beschichteter Stahl, druckgegossenes Aluminium, Kunststoff.




Stützklappgriffe zur Montage auf der Toilette

- ▶ **R1170000** Mit WC-Sitz R37
- R1171000** Ohne WC-Sitz

Lässt sich einfach und schnell auf der Toilette montieren.
Die gepolsterten Griffe sind angenehm für Hände und Arme.
Die Griffe lassen sich einzeln hochklappen.
Lieferung mit Scharnieren BL1999.

Wird nur mit den folgenden Toilettensitzen empfohlen: R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 oder R38.

Stützklappgriffe sind besonders geeignet für Personen, die während des WC-Besuchs Unterstützung benötigen. Beim Umsetzen vom und in den Rollstuhl werden wandmontierte Stützklappgriffe empfohlen.

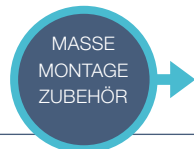

Stützklappgriff, höhenverstellbar

R1110000 Höhenverstellbar, 150 mm

Länge: 850 mm.
In hochgeklappter Position: 200 mm.
Max. Belastung: 120 kg.
Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.



Stützklappgriff, höhenverstellbar, mit Bodenstütze

R1111000 Mit Bein, höhenverstellbar, 145 mm

Länge: 850 mm.
In hochgeklappter Position: 155 mm.
Max. Belastung: 135 kg.
Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.



Stützklappgriff, höhenverstellbar, freistehend

R1161000 Höhenverstellbar, 670 mm

Länge: 850 mm.
Max. Belastung: 120 kg.
Befestigungsmaterial für die Bodenmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Geeignet wenn:

- die Wand instabil ist.
- der Abstand zwischen Wand und Toilette größer als 700 mm ist.
- Wandmontage nicht möglich ist.



Stützklappgriff

R1100000 Stützklappgriff

Länge: 850 mm.
In hochgeklappter Position: 185 mm.
Max. Belastung: 120 kg.
Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.



Stützklappgriff mit Bodenstütze

R1101000 Länge: 850 mm
R1102000 Länge: 800 mm

Länge: 850 mm.
In hochgeklappter Position: 140 mm.
Max. Belastung: 135 kg.
Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.

WC-Sitze



Menschen sind unterschiedlich gebaut. Sie unterscheiden sich nach Größe und Statur. WC-Sitze von Pressalit Care tragen diesen Unterschieden Rechnung. Deshalb liefern wir auch erhöhte und schräggestellte Ausführungen.

Alle Modelle lassen sich auf die meisten handelsüblichen WC-Keramiken montieren.

Die ergonomischen Sitze von Pressalit Care sind funktionell und haben darüber hinaus ein ansprechendes Design.

Hergestellt aus hochwertigem Duroplast, extrem robust und einfach zu reinigen.

Stabile Edelstahl-Scharniere für mehr Sicherheit und Stabilität.



Um die Stabilität zu erhöhen, empfehlen wir, die Modelle Dania und Colani mit Spezialscharnier BV2999/BV3999 inkl. durchgehender Scharnierwelle zu montieren.



Die speziellen Puffer sorgen für festen Halt auf der WC-Keramik, besonders bei seitlichen Belastungen, z.B. beim Umsetzen. Die Puffer lassen sich so einstellen, dass sie - je nach Form der WC-Keramik - entweder innen oder außen greifen.



Strapazierfähige, einfach zu reinigende Scharniere.

Materialien: Duroplast, Edelstahl.
Max. Belastung: Sitze: 250 kg.
 Erhöhte Sitze: 150 kg.



Dania

R27xxx

◀ **R37xxx**

R28000

R38000

ohne Deckel, mit Scharnier
 mit Deckel, mit Scharnier
 ohne Deckel, vorne offen, mit Scharnier
 mit Deckel, vorne offen, mit Scharnier

Der anatomisch geformte Sitz wird den Anforderungen der meisten Benutzer gerecht. Die ebene Sitzfläche bietet ein angenehmes Sitzgefühl und erleichtert das seitliche Umsetzen.

Der Dania WC-Sitz ist auch mit offenem Sitzring für die Nutzung als Bidetsitz mit leichtem Zugang für eine Handdusche erhältlich.

Ab Werk mit Universalscharnier B82/B83 ausgestattet. Auch lieferbar mit Spezialscharnier D92 oder vandalen- und diebstahlsicherem Scharnier BZ7.

- 000: Weiß
- 112: Anthrazitgrau
- 035: Rot
- 108: Dunkelblau



Ergosit

R29000
◀ **R30000**

ohne Deckel, mit Scharnier
mit Deckel und Scharnier

Große, breite Sitzfläche mit markanten Stützprofilen. Daher ist er besonders gut geeignet für »große« Erwachsene mit Verdauungsbeschwerden.

Im vorderen Bereich stimulieren Druck und Belastung der Nerven und Muskeln im Oberschenkel aufgrund der gewölbten Oberfläche des Sitzes die Darmentleerung. Die spezielle Ausformung im hinteren Bereich (Rillen) verhindert eine Vakuumbildung und erleichtert ein Aufstehen vom WC auch nach längerer Sitzdauer.

Werkseitig mit Spezialscharnier D92 ausgestattet.
Auch lieferbar mit vandalen- und diebstahlsicherem Scharnier BZ7.



Colani

R26000
◀ **R36000**

ohne Deckel, mit Scharnier
mit Deckel und Scharnier

Die nach innen schräg gestellte Sitzfläche des Colanis stützt und stabilisiert den Beckenbereich und sorgt dafür, dass der Sitz auch gut für Kinder (ab 6 Jahren) sowie für Muskelschwundkranke geeignet ist.

Die hochgezogenen Seiten des Sitzringes eignen sich zum festhalten und zum stabilisieren der Körperbalance.

Werkseitig mit Universalscharnier B82/B83 ausgestattet. Auch lieferbar mit Spezialscharnier D92 oder dem vandalen- und diebstahlsicherem Scharnier BZ7.



WC-Sitze, 50 mm erhöht

◀ **R21000**
R31000
R23000
R33000
R43000

Dania, 50 mm, vorne offen, ohne Deckel
Dania, 50 mm, vorne offen, mit Deckel
Dania, 50 mm, ohne Deckel
Dania, 50 mm, mit Deckel
Dania, 50 mm, mit Deckel, mit
Spritzblende
R19000
R20000
Ergosit, 50 mm, ohne Deckel
Ergosit, 50 mm, mit Deckel

Dania R43000 ist mit einer Spritzblende ausgestattet.

Für die übrigen Dania-Sitze ist die Spritzblende T9516 separat zu bestellen.

Wird mit Spezialscharnier geliefert.



WC-Sitze, 100 mm erhöht

R22000
R32000
R24000
◀ **R34000**

Dania, 100 mm, vorne offen, ohne Deckel
Dania, 100 mm, vorne offen, mit Deckel
Dania, 100 mm, ohne Deckel
Dania, 100 mm, mit Deckel

Wird mit Spezialscharnier geliefert.

Dania 100 mm ist mit einer Spritzblende T9515 ausgestattet.



WC-Sitze, 50/100 mm schräg gestellt

R35000

Dania, 50/100 mm, schräg gestellt mit Deckel

Wird mit Spezialscharnier geliefert.

Dania 50/100 mm ist mit einer Spritzblende T9515 ausgestattet.

WC-Keramik



Die Sitzhöhe und die Form der WC-Keramik sind entscheidend, damit der Benutzer stabil auf der WC-Keramik sitzt.

Viele Benutzer haben Schwierigkeiten, sich auf ein WC mit Standardhöhe zu setzen bzw. wieder aufzustehen. Entscheiden Sie sich in solchen Fällen für ein erhöhtes WC oder eine in der entsprechenden Höhe wandhängend montierte WC-Keramik.



WC, wandhängend

- ◀ **R2099000** WC, 700 mm
- R2091000** WC, 540 mm

Das wandhängende WC mit der 700 mm-Ausladung empfiehlt sich für Badezimmer, in denen Rollstuhlbewerber umgesetzt werden müssen. Ein langes Becken gibt auch dem Helfer mehr Platz.



WC, bodenstehend

- R2097000** WC, hohes Modell, Abg. senkrecht

Materialien: Porzellan

Durch das wandhängende WC ist eine Montage in individueller Höhe möglich.

Darunter ist Platz für die Fußstützen des Rollstuhls, die Beine des Mobillifts und die Füße des Helfers. Erleichtert die Reinigung des Fußbodens.

Sitzhöhe ohne WC-Sitz: 460 mm.

Lieferung mit Doppelspülung, Werkseinstellung 3/6 Liter.
Kann auf 2/4 Liter umgestellt werden.

Duschklapsitze



S. 14-15



Für manche Benutzer ist die Möglichkeit, während des Duschens zu sitzen, eine Frage der Sicherheit. Die Duschsitze werden im Duschbereich montiert und lassen sich je nach Bedarf einfach hoch- oder herunterklappen.

Sitz und Lehne können zur Reinigung abgenommen werden.

Der Duschklapsitz ist so geformt, dass das Wasser ablaufen kann.

Das Wandscharnier und das Stützbein werden für zusätzliche Widerstandsfähigkeit aus Rilsan®-beschichtetem Edelstahl hergestellt. Rilsan®-Beschichtung bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion, eine angenehme Haptik und die Möglichkeit der einfachen Reinigung.



Rückenlehne für Duschklapsitz

R1651000 Rückenlehne

Materialien: Edelstahl, Rilsan®-beschichteter Stahl, Kunststoff.
Farbe: Sitzfläche und Rückenlehne haben die Farbe hellgrau, Wandscharnier und Stützbein haben die Farbe weiß.



Duschklapsitz

R1600000 Sitzfläche B450 x T440 mm.

Max. Belastung: 125 kg.




Duschklapsitz mit Bodenstütze

R1602000 Sitzfläche B450 x T440 mm.

Max. Belastung: 125 kg.

Haltegriffe

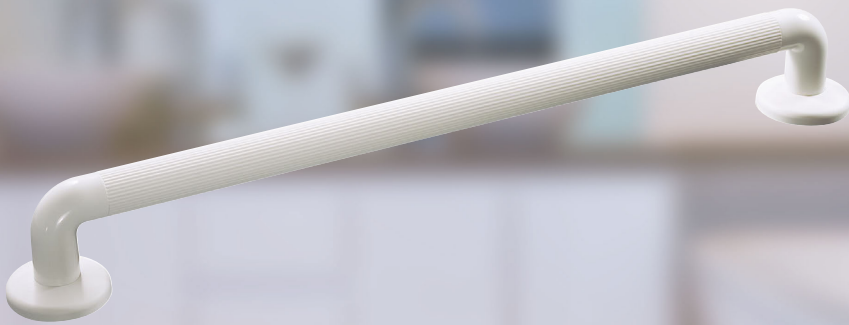

Das Haltegriff-System von Pressalit Care aus ABS-Kunststoff gibt in jeder Situation einen guten Halt. Es kann in Badezimmern und an anderen Orten mit einem zusätzlichen Stützbedarf verwendet werden. Die Griffe können je nach Bedarf des einzelnen Benutzers zusammengestellt werden.


Das Material ist durchgefärbt, sodass Kratzer und normaler Verschleiß nicht sichtbar sind.

Der Griffdurchmesser beträgt 32 mm und der Griff liegt daher gut in der Hand.

Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 52 mm und ermöglicht daher einen festen Halt.




Abdeckkappe wird nach Montage der Wandrosette festgedrückt, um die Schrauben zu verdecken.

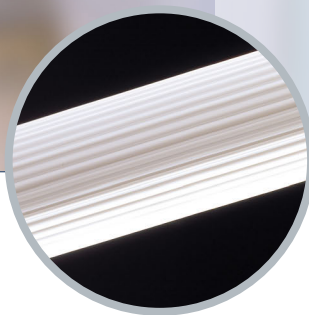


Der Haltegriff hat eine griffige, gerillte Oberfläche.

Materialien: ABS-Kunststoff.
Max. Belastung: Bei einer Spannweite von bis zu 600 mm: 100 kg.

Farben: ○ 000: Weiß
 ● 108: Dunkelblau

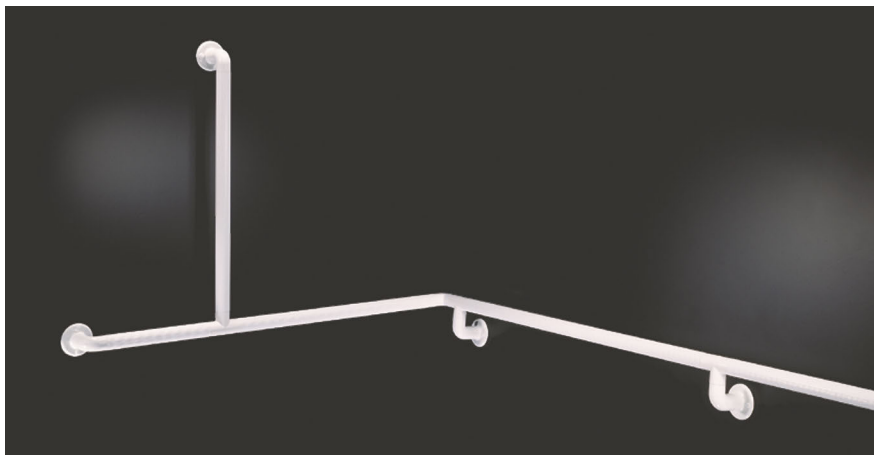


Haltegriffe aus ABS-Kunststoff können in einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten zusammengestellt und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.

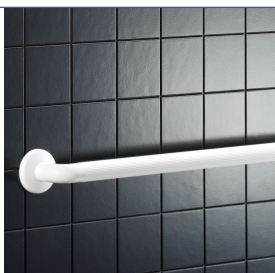

Haltegriff mit Abdeckkappe

R1351xxx	153 mm
R1352xxx	306 mm
R1353xxx	459 mm
R1354xxx	612 mm
R1451000	153 mm. In Verkaufsverpackung, inkl. Schrauben und Dübeln
R1452000	306 mm. In Verkaufsverpackung, inkl. Schrauben und Dübeln
R1453000	459 mm. In Verkaufsverpackung, inkl. Schrauben und Dübeln
R1454000	612 mm. In Verkaufsverpackung, inkl. Schrauben und Dübeln

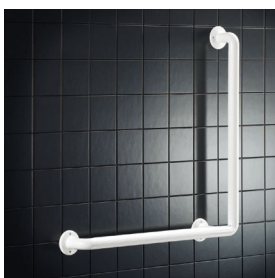

Winkelgriff

R1364xxx	Rechts, 90°, 600 x 600 mm
R1374xxx	Links, 90°, 600 x 600 mm



Rohrstücke

R1315xxx	81 mm
R1314xxx	234 mm
R1313xxx	387 mm
R1312xxx	540 mm

Rohrstücke sind in Sonderlängen von bis zu 612 mm verfügbar - und können mithilfe von T-Stücken verlängert werden.



Anschlussstücke

R1320xxx	Wandrosette mit T-Stück und Zapfen*
R1321xxx	Wandrosette mit 90° Winkel und Zapfen*
R1324xxx	Wandrosette mit 90° Winkel und Zapfen inkl. Abdeckkappe
R1325000	Zapfen
R1345xxx	90° Winkel ohne Zapfen

*) Wird ohne Abdeckkappe geliefert

Zusammenbau der Haltegriffe


Rohrstücke und Anschlussstücke werden mit ABS-Klebstoff zusammengesetzt.

Pressalit Care empfiehlt Cyanolit (Pressalit Care Nr. T4654).


Maßzeichnungen

Waschtisch-Lifter

R1210

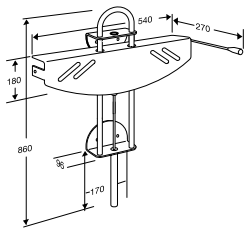


R1214

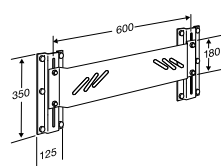


Waschtisch - Waschtischarmatur


R2050
R2051

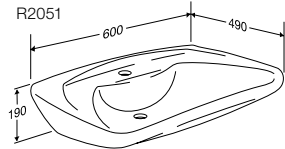


R2052
R2053

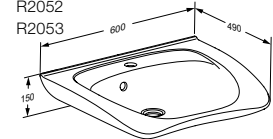


RT622

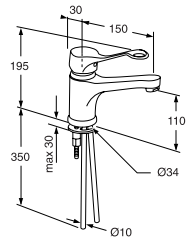


WC-Keramik

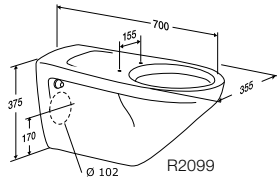

R2099

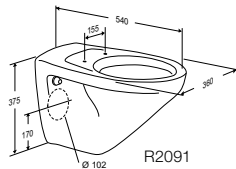


R2091

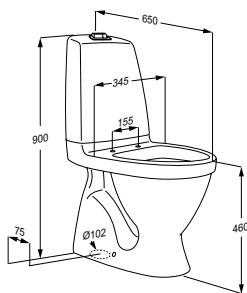

R2097


Duschklappsitze

R1651

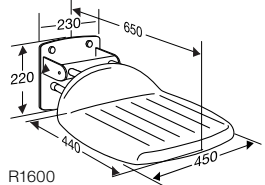


R1600


R1602

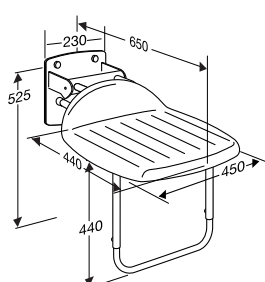


Stützklappgriffe

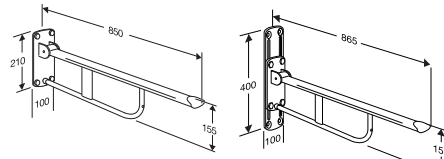

R1100

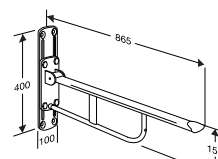


R1110

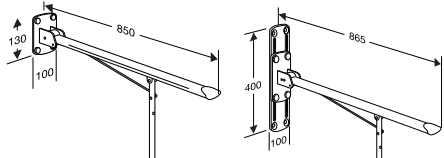


R1101

H: 850 mm

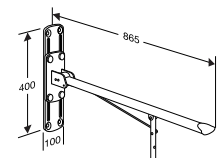


R1111

H: 800 mm

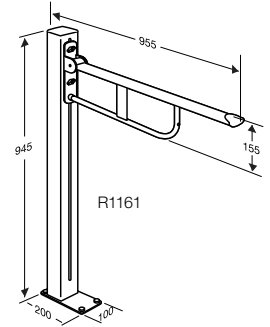

R1161

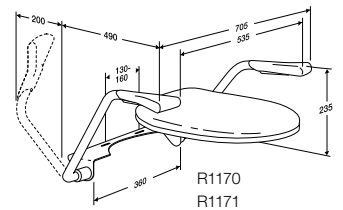

R1170
R1171


WC-Sitze

R27

R37

R28

R38



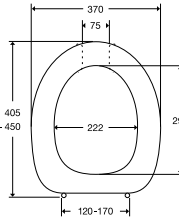


R29



R30

R26

R36

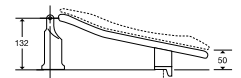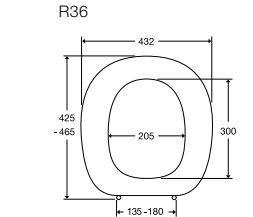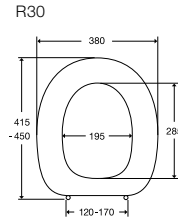

R35

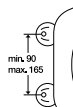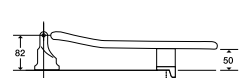

R21

R31



R23

R33

R43

R19

R20

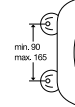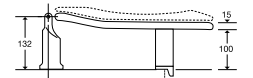


R22

R32

R24

R34

Haltegriffe

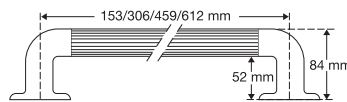

R1351

R1451

R1352


R1452

R1353


R1453

R1354


R1454

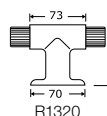

R1320

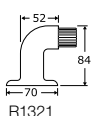

R1321

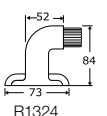


R1324




R1325



R1345

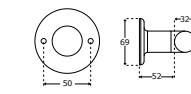


R1364
R1374

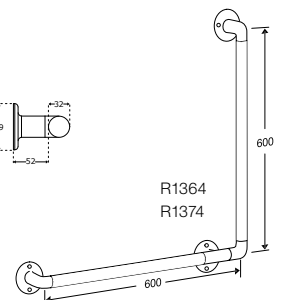

Montage und Zubehör

Flexible Zu- und Ablaufsysteme:

Höhenverstellbare Waschtisch-Lifter erfordern flexible Zu- und Ablaufsysteme. Es ist wichtig, dass die Rohinstallation richtig platziert wird. Den einzelnen Produkten liegen ausführliche Montageanleitungen bei. Diese können bereits in der Projektierung abgerufen werden, beispielsweise zu Planungszwecken.

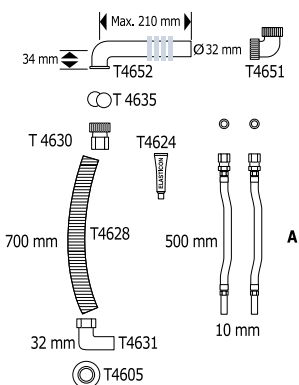

Flexible Zu- und Ablaufsysteme

R2061 3/8"/500 mm


Zu- und Ablaufschläuche sind VA-geprüft (Dänemark).

Die Zu-/Ablaufschläuche sind in Sondergrößen verfügbar. Die Montagehöhe ist u.a. an die Fußstützen eines Rollstuhls angepasst.



R2061: A = T4604

Flexible Zu- und Ablaufsysteme können mit Geruchsverschluss R2076 und Belüftersatz R2059 ergänzt werden. Pressalit Care empfiehlt, dass die an der Wand angebrachten Zu- und Ablaufanschlüsse einen 90° Winkel haben, der nach unten zeigt.


Platzierung Zu- und Ablaufsystem

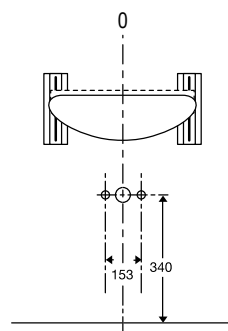





Montageanleitung für WC-Sitze und Scharniere

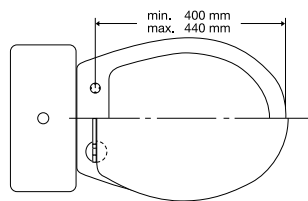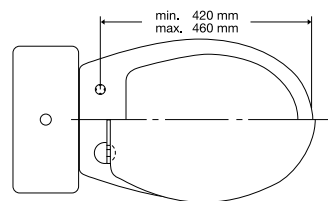

A-Position

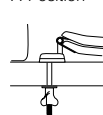


B-Position

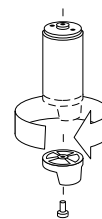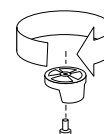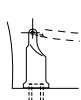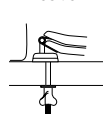


Zubehör

R1151

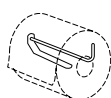


Papierhalter mit Feder für Stützklappgriffe. Für alle Modelle mit Ausnahme von R1170 und R1171.

R1175

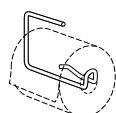

Papierhalter für R1170 und R1171. Montage rechts oder links möglich.

R1152

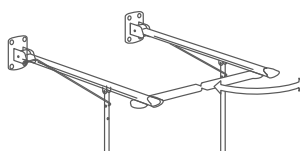


Vorderschienen für Stützklappgriff.

B82P999 B83P999



Standardscharnier für Dania und Colani. Edelstahl.

D92999

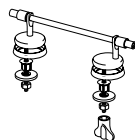

Spezialscharnier: Scharnier mit durchgehender Scharnierwelle. Wird angebracht, wenn hinten eine zusätzliche Stabilität wünschenswert ist. Wird für Dania und Colani empfohlen. Edelstahl.

T9515



Spritzblende, 100 mm.

T9516




Spritzblende, 50 mm.

B82: 100 mm Schraube, für die skandinavischen Märkte.
B83: 75 mm Schraube, für alle Märkte mit Ausnahme der skandinavischen.


Spritzblende: Matter transparenter Kunststoff. Leicht abnehmbar, z.B. bei Reinigung und Austausch.

R2076

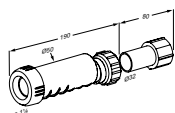

Geruchsverschluss für flexibles Ablaufsystem.

R2059

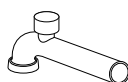

Belüftersatz für Ablaufsystem

Weitere Informationen und Montageanleitungen finden Sie unter www.pressalitcare.com.

PRESSALIT® CARE

Mobilitätsbeeinträchtigungen müssen einen Menschen nicht in seinem Spielraum einschränken. Seit über 35 Jahren hat Pressalit Care sich bei der Entwicklung von flexiblen Lösungen für Küche und Badezimmer für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen von der keep living-Philosophie leiten lassen.

Pressalit Care ist mit seinen forschungsbasierten Kenntnissen führend im Bereich Speziallösungen für Küche und Badezimmer und berät gegenwärtig Kunden auf der ganzen Welt.

Der grundlegende Respekt für jeden einzelnen Menschen und seine Möglichkeiten spiegelt sich auch in der Beziehung des Unternehmens zu der Gesellschaft und seiner Umgebung wieder. Bei Pressalit ist die Corporate Social Responsibility (CSR) tief in der Strategie und den Werten verankert, und sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für alle Teile der Organisation.

Der Hauptsitz von Pressalit Care befindet sich in Dänemark.

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Dänemark
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
e-mail: pressalit@pressalit.com

Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
D-25337 Elmshorn
Deutschland
Tel.: 04121-26269-0
Fax: 04121-26269-69
e-mail: de@pressalit.com

